


EO Chemical Indicator EO Kimyasal İndikatör

@x **AXIS**®

TYPE 5

Product Code/ Ürün Kodu
AXCP30

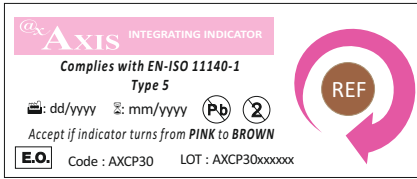

250 pcs / adet

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com



EO Chemical Indicator AXCP30 for monitoring Ethylene Oxide sterilization processes

Product description

Axis AXCP30 Ethylene Oxide Chemical Indicators are designed to react to Ethylene Oxide sterilization processes within loads, ensuring adequate control of the effectiveness of sterilization processes (temperature, time, relative humidity and gas concentration). Pink indicator turns to reference color of Brown when the process reaches the selected variables.

Storage

Store it in a dark place between 15-30°C, 35-60% relative humidity.

Do not put direct sunlight.

Do not re-use.

Do not store close to sterilizing agents.

Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in recommended conditions.

Directions for use

1. Place the Axis AXCP30 Ethylene Oxide Chemical Indicators within each package, bag or tray that will be sterilized by Ethylene Oxide. Recommended placement: two CIs in opposite corners of each level.
2. Make sure you have used enough amount of chemical indicators according to your country/hospital regulations and the size of the load.
3. Run the sterilizer as usual.
For 30 min at 30°C or 20 min at 54°C. 60% RH and 600 mg/l EO.
4. It is recommended to use Axis AX10 Ethylene Oxide Biological Indicator for sterilization assurance.
5. After the sterilization and aeration completed. Wear protective cloths and remove Axis AXCP30 Ethylene Oxide Chemical Indicator from the load.
6. Compare the results from reference color. If the color change to reference color of Brown consider that the established sterilization conditions were met.
7. After use, for recording, the indicator will remain its final color for 6 months. It is non-toxic and does not contain lead. It does not deteriorate, wrinkles and transfers to materials to be sterilized.

Important

If the indicator does not properly turn to Brown color, these may be the reasons;

- Inadequate cycle duration
- Overloading / incorrect loading of the sterilizer
- Improper humidity
- Inadequate sterilization concentration

Disposal


Discard after use, according to your country's healthcare and safety regulations.

Precautions

Do not store the product near sterilizing agent.

Do not expose this product to Dry Heat, Steam or any sterilization process other than EO.

Do not reuse the sterilizer until the indicator has changed into the color indicated in the product

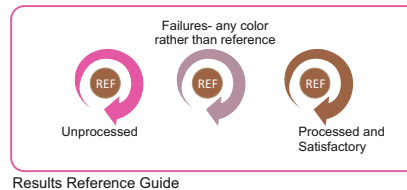

ENG

EO Kimyasal İndikatör AXCP30 Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerini izlemek için

Ürün açıklaması

Axis AXCP30 Etilen Oksit Kimyasal İndikatörleri, sterilizasyon işlemlerinin (sıcaklık, zaman, bağıl nem ve gaz konsantrasyonu) etkinliğinin yeterli kontrolünü sağlayarak, yükler içindeki Etilen Oksit sterilizasyon işlemlerine tepki vermek üzere tasarlanmıştır. İşlem seçilen değişkenlere ulaştığında Pembe indikatör referans rengi olan Kahverengi'ye döner.

Depolama

15-30°C, % 35-60 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Tekrar kullanmayınız.

Sterilizasyon maddelerinin yakınında saklamayınız.

İndikatörler, tavsiye edilen koşullarda saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık bir son kullanma tarihine sahiptir.

Kullanım Talimatı

1. Axis AXCP30 Etilen Oksit Kimyasal İndikatörlerini Etilen Oksit ile sterilize edilecek her bir paket, torba veya tepsiye yerleştiriniz.
Önerilen yerleştirme: her seviyenin karşıt köşelerinde iki kimyasal indikatör.
2. Ülkenizin/hastanenin düzenlemelerine ve yükün boyutuna göre yeterli miktarda kimyasal indikatör kullandığınızdan emin olunuz.
3. Sterilizatörü her zamanki gibi çalıştırınız.
30°C'de 30 dakika veya 54°C'de 20 dakika. % 60 Bağıl Nem ve 600 mg/l EO.
4. Sterilizasyon güvencesi için Axis AX10 Etilen Oksit Biyolojik İndikatör kullanılması tavsiye edilir.
5. Sterilizasyon ve havalandırma tamamlandıktan sonra. Korumayı ürünler giyin ve Axis AXCP30 Etilen Oksit Kimyasal İndikatörü yükün içinden çıkarınız.
6. Referans rengine göre sonuçları karşılaştırın. İndikatör kahverengi referans rengine dönerse, belirlenen sterilizasyon koşullarını karşılanmış demektir.
7. Kullanımdan sonra, kayıt için, gösterge 6 ay boyunca nihai rengini koruyacaktır. Toksik değildir ve kurşun içermez. Bozulmaz, kırılmaz ve sterilize edilecek malzemelere transfer olmaz.

Önemli

İndikatör Kahverengi rengine doğru dönmezse, nedenleri şunlar olabilir;

- Yetersiz döngü süresi
- Sterilizatörün aşırı yüklenmesi / yanlış yüklenmesi
- Yanlış nem
- Yetersiz sterilizasyon konsantrasyonu

Yoketme


Kullandıktan sonra, ülkenizin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine göre yok edin.

Uyarı

Sterilize edici ajanların yanında depolamayınız.

EO haricinde kuru ısı, buhar ya da öteki işlemler için ürünü kullanmayınız.

Üründe gösterilen renk dönüşümü olmadan sterilizatörü tekrar kullanmayınız.

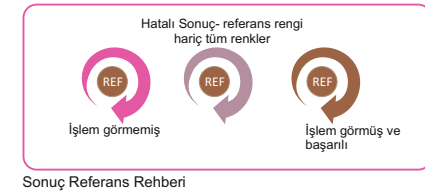

TR