

Steam Autoclave Tapes Buhar Otoklav Bantları

@x **AXIS**®

Product Code/Ürün Kodu
AXO19 & AXO25
Type 1



compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıglı IZMIR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Steam Autoclave Tape AXO19 & AXO25 for monitoring Steam sterilization processes

Product description

Axis Steam Autoclave Tapes with self-adhesive paper tape printed with indicator ink have been designed to monitor Steam sterilization processes, ensuring adequate exposure to the sterilizing agent during the sterilization process and allowing to distinguish between processed and unprocessed items.

Directions for use


1. Place a wrapped package closed with Axis Steam Autoclave Tape that will be sterilized by Steam inside a sterilizer .
2. Axis Steam Autoclave Tape has 2 size;
AXO19 - 19 mm x 50 m
AXO25- 25 mm x 50 m
3. Run the sterilizer as usual.
3.5 min. at 134 °C / 15min. at 121 °C.
4. After the sterilization process has finished, remove the package from the autoclave and analyze the indicator results. The indicator must turn to the reference color for when it was exposed to Steam.
5. If a non-uniform or no color change is noticed, it should be reported immediately to the supervisor.

Storage

Store it in a dark place between 15-30°C, 35-60% relative humidity. Do not put direct sunlight. Do not re-use. Do not store close to sterilizing agents. Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in recommended conditions.

Disposal

Discard after use, according to your country's healthcare and safety regulations.

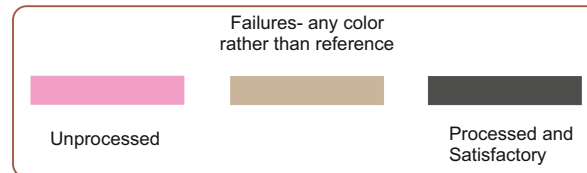

Results Reference Guide

ENG

Buhar Otoklav Bandı AXO19 & AXO25 Buhar sterilizasyon işlemlerini izlemek için

Ürün Açıklaması

İndikatör mürekkebi ile basılmış kendinden yapışkanlı kağıt Axis Buhar Otoklav Bantları, Buhar sterilizasyon işlemlerini izlemek, sterilizasyon işlemi sırasında sterilizasyon ajanına yeterli düzeyde maruziyeti ve işlenmiş/işlenmemiş öğeleri ayırt etmeye izin vermek için tasarlanmıştır.

Kullanım Talimatı


1. Buharla sterilize edilecek malzemeleri Axis Buhar Otoklav Bandı ile kapatıp sterilizatör içine yerleştirin.
2. Axis Buharlı Otoklav Bandı 2 boydadır;
AXO19 - 19 mm x 50 m
AXO25- 25 mm x 50 m
3. Sterilizatörü her zamanki gibi çalıştırın.
3.5 dk. 134 °C'de / 15dk. 121 °C'de.
4. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra paketi otoklavdan çıkarın ve indikatör sonuçlarını analiz edin. İndikatörBuhara maruz kaldığında referans rene dönmelidir.
5. Eşit olmayan bir renk değişikliği fark edilirse, derhal yetkili kişiye bildirilmelidir.

Depolama

15-30°C, %35-60 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığı koymayın. Yeniden kullanmayın. Sterilize edici maddelerin yakınında saklamayın. İndikatörlerin, önerilen koşullarda saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık bir son kullanma tarihi vardır.

Yok etme

Kullandıktan sonra ülkenizin sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine göre atın.

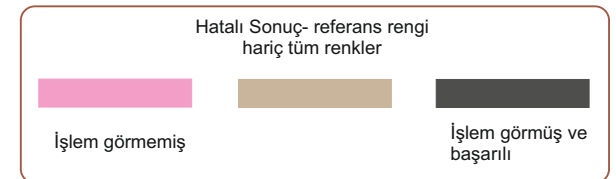

Sonuç Referans Rehberi

TR