


Formaldehyde Chemical Indicator

Formaldehit Kimyasal İndikatör

@x **AXIS**®

TYPE 4

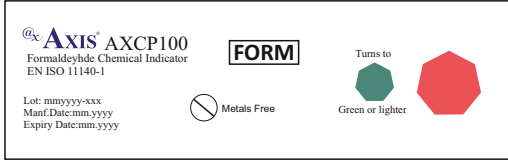

Size/Ölçü: 60mmx30mm

250 pcs / adet

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cigli IZMIR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com



Formaldehyde Chemical Indicator

for monitoring Formaldehyde sterilization processes

Product description

Axis AXCP100 Formaldehyde Chemical Indicators are designed to react to Formaldehyde sterilization processes within loads, ensuring adequate control of the effectiveness of sterilization processes. Red indicator turns to reference color of green when the process reaches the selected variables.

Directions for use

1. Place the Axis AXCP100 Formaldehyde Chemical Indicators within each package, bag or tray that will be sterilized by Formaldehyde
2. Make sure you have used enough amount of chemical indicators according to your country/hospital regulations and the size of the load.
3. Run the sterilizer as usual.
4. After the sterilization completed. Wait for at least 10 minutes to load cool down.
5. Compare the results from the given reference color chart. If the color change to reference color of green means that the established sterilization conditions were met.
6. After use, for recording, the indicator will remain its final color for 6 months. It is non-toxic, does not contain lead and does not transfers to materials to be sterilized. Axis AXCP100 Formaldehyde Chemical Indicators does not deteriorate or wrinkle during sterilization.

Storage


Store it in a dark place between 15-30°C, 35-60% relative humidity.
Do not put direct sunlight.
Do not re-use.
Do not store close to sterilizing agents.

Shelf-life

Chemical Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored at recommended storage conditions. Both the expiration date and batch number of the product are specified on the package label and in each unit of the product.
Do not use indicators after their expiration date.

Disposal

Discard after use, according to your country's healthcare and safety regulations.

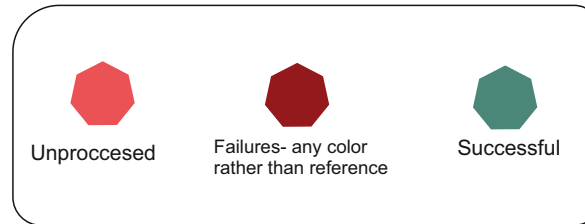

Formaldehit Kimyasal İndikatör

Formaldehit sterilizasyon işlemlerini için

Ürün açıklaması

Axis AXCP100 Formaldehit Kimyasal İndikatörleri, sterilizasyon işlemlerinin etkinliğinin yeterli kontrolünü sağlayarak, yükler içindeki Formaldehit sterilizasyon işlemlerine tepki vermek üzere tasarlanmıştır. İşlem seçilen değişkenlere ulaştığında Kırmızı indikatör referans rengi olan yeşile döner.

Kullanım Talimatı

1. Axis AXCP100 Formaldehit Kimyasal İndikatörlerini Formaldehit ile sterilize edilecek her bir paket, torba veya tepsisi yerleştiriniz.
2. Ülkenizin/hastanenizin düzenlemelerinize ve yükün boyutuna göre yeterli miktarda kimyasal indikatör kullandığınızdan emin olunuz.
3. Sterilizatörü her zamanki gibi çalıştırınız.
4. Sterilizasyon tamamlandıktan sonra yükün soğuması için en az 10 dakika bekleyiniz.
5. Verilen referans renk tablosuna göre sonuçları karşılaştırın. İndikatör yeşil referans rengine dönerse, belirlenen sterilizasyon koşulları karşılanmış demektir.
6. Kullanımdan sonra, kayıt için, gösterge 6 ay boyunca nihai rengini koruyacaktır. İndikatör mürekkebi toksik değildir, kurşun içermez ve sterilize edilecek malzemelere transfer olmaz. Axis AXCP100 Formaldehit Kimyasal İndikatör sterilizasyon işleminde bozulma ve kırışma yapmaz.

Depolama

15-30°C,% 35-60 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayınız.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Tekrar kullanmayınız.
Sterilizasyon maddelerinin yakınında saklamayınız.

Raf Ömrü

Kimyasal İndikatörlerin önerilen saklama koşullarında saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık bir son kullanma tarihi vardır. Ürünün hem son kullanma tarihi hem de parti numarası ambalaj etiketinde ve ürünün her biriminde belirtilmiştir.Son kullanma tarihinden sonra indikatörleri kullanmayın.

Yok etme

Kullandıktan sonra, ülkenizin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine göre yok edin.



EN

TR