




Chemical Indicator / Kimyasal indikatör for Dry Heat sterilization processes kuru ısı sterilizasyon işlemleri içindir

Product Code / Ürün Kodu: AXCP50

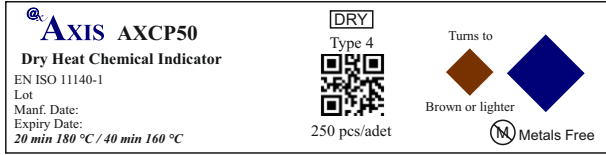

Size/Ölçü: 80mmx20mm

250 pcs / adet

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıglı IZMIR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com



Chemical Indicator

for monitoring Dry Heat sterilization processes

Product description

AXIS Chemical Indicators are designed to react to Dry Heat sterilization processes within loads, ensuring an adequate control of the effectiveness of sterilization processes (temperature and time). Dark blue ink was developed to turn to brown when the process reaches the selected variables. Indicators allow to rapidly detect whether the critical parameters of the sterilization process for which they have been designed to respond have been reached.

Characteristics

Chemical strips of 20 x 80 mm.
Indicators 100 % free of toxic heavy metals

Indications for use

Use Axis Indicators for monitoring Dry Heat sterilization processes.
Endpoint conditions: 160 °C, 40 minutes // 180 °C, 20 minutes.

Precautions

Do not expose Axis Indicators to Steam, Ethylene Oxide or any sterilization processes other than Dry Heat.

Instructions for use


- Place a Axis Indicator within each package, bag or tray that will be sterilized by Dry Heat.
- In rigid containers place the indicator in every corner, or at least two diagonally opposite corners, to ensure that the sterilization agent has reached the most inaccessible areas.
- After completing the process analyze the results. The indicator must turn to the reference color for considering that the established conditions were met.

Storage and shelf life

- Indicators should be stored in a dry place, away from light and at temperatures between 10-30 °C, 30-80 % relative humidity. Do not wet. Do not store close to sterilizing agents.
- Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in recommended conditions. Both the expiration date and batch number of the product are specified on the package label and in each unit of the product. Do not use indicators after their expiration date.
- After use, the indicator will not change within 6 months when stored at previously indicated conditions.

Disposal

Discard chemical indicators after use according to your country's healthcare and safety regulations.

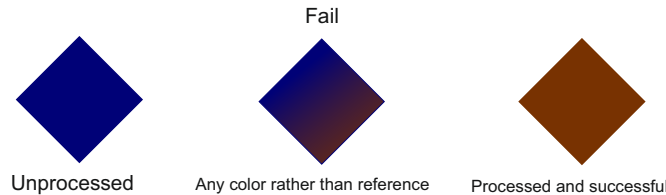

Unprocessed

Any color rather than reference

Processed and successful

Kimyasal İndikatör

Kuru Isı sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi içindir

Ürün Açıklaması

AXIS kimyasal indikatör yükler içerisinde Kuru Isı ile tepkimeye girecek şekilde tasarlanmıştır, sterilizasyon işleminin etkili olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır (sıcaklık ve zaman). Lacivert mürekkep işlem istenilen değerlere ulaştığında kahverengiye döner. İndikatörler, yanıt vermek üzere tasarlandıkları sterilizasyon işleminin kritik parametrelerine ulaşıp ulaşılmadığını hızlı bir şekilde tespit etmeye olanak tanır.

Özellikler

20 x 80 mm kimyasal indikatör şeridi
İndikatörler 100% ağır zehirli metal içermez.

Kullanım Koşulları

Axis İndikatörü Kuru Isı sterilizasyon işlemlerini kontrol etmek için kullanınız.
Uç nokta koşulları: 160 °C, 40 dakika // 180 °C, 20 dakika.

Uyarılar

Axis Kimyasal İndikatörü Kuru Isı hariç, Buhar, Etilen Oksit veya diğer sterilizasyon işlemlerine maruz bırakmayınız.

Kullanım Talimatları


- Axis indikatörü steril olacak her bir poşet veya tepsi içerisine yerleştiriniz.
- Dik kaplar için steril edici maddenin her alana ulaştığından emin olmak için her köşeye birer adet indikatör yerleştiriniz ya da karşılıklı köşelere en az iki tane kimyasal indikatör yerleştiriniz.
- İşlem bittikten sonra sonuçları analiz ediniz. İndikatör istenilen sterilizasyon koşullarına ulaştığında referans renge dönmektedir.

Depolama ve raf ömrü

- İndikatörler kuru, ışıktan uzak, 10-30 °C sıcaklıkta, %30-80 bağıl nemde saklanmalıdır. Islatmayın. Sterilize edici maddelere yakın saklamayın.
- Tavsiye edilen koşullarda saklandığında, indikatörleri son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Ürünün hem son kullanma tarihi hem de parti numarası ambalaj etiketinde ve ürünün her biriminde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçen indikatörleri kullanmayın.
- Kullanımdan sonra indikatör, önceden belirtilen koşullarda saklandığında 6 ay içinde değişmeyecektir.

İmha etme

Kullandıktan sonra ülkenizin ve kurumunuzun güvenlik düzenlemelerine göre imha ediniz.

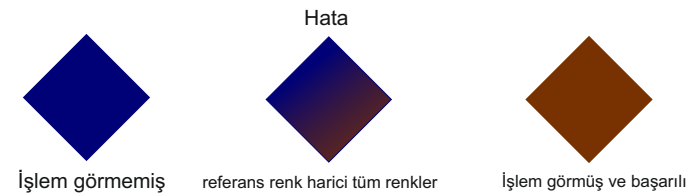

İşlem görmemiş

referans renk harici tüm renkler

İşlem görmüş ve başarılı

ENG

TR