


Cleaning Efficiency Indicator Yıkama Etkinlik İndikatörü

@x **AXIS**®

Product Code/ Ürün Kodu
AXCP120

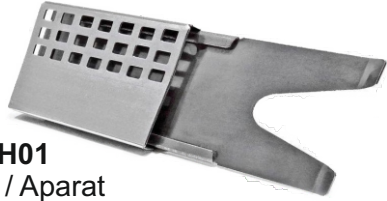

AX-WIH01
Holder / Aparat

200 pcs / adet

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı IZMIR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Cleaning Efficiency Indicator For Washers

AXCP120

Product description

Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicators are designed for validation and routine monitoring of cleaning processes effectiveness in automatic machines including ultrasonic washing machines with different washing configurations. Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicators allow a quick visual evaluation of the process and can identify potential sources of error.

Directions for use

1. Take a **Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator** and placed it on the **AXIS AX-WIH01 Holder**. Holder has been designed to mimics the real challenge of thoroughly cleaning hard-to-reach areas for the washing disinfecting process.
2. Place the **AXIS AX-WIH01 Holder** along with **Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator** inside and other material packages into the washer. Holder has hooks to ease placement on the tray.
3. Run the washer as usual.
4. Once the cleaning cycle is over, remove the holder with an indicator. Washing efficacy is influenced by detergent, water temperature, time and washing penetration. A good cleaning result is achieved by an appropriate combination of these variables.
5. Observe and record results according to the given color conversion chart. If unfavorable results do occur, users must check the quality/quantity of detergent, cleaning time, temperature as well as the general condition of the washer.
6. **Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator** has a writable structure that allows users to write notes on the indicator and use this label for recording/documentation.

Storage

Store it in a dark place between 10-30°C and 30-80 % relative humidity. Do not freeze and do not put direct sunlight. (this may deteriorate its coloring)

Important

Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator is a single-use product. Do not touch the indicator ink with your hands. **AXIS AX-WIH01 Holder** is reusable up to 100 cycles.

Disposal

Discard after use according to your country's healthcare and safety regulations.

○ Processed and correct



Failure

Yıkama Etkinlik İndikatörü Yıkayıcılar için

AXCP120

Ürün açıklaması

Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörü, farklı yıkama konfigürasyonlarına sahip ultrasonik yıkama makineleri de dahil olmak üzere otomatik yıkama makinelerinde temizleme işlemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve rutin olarak izlenmesi için tasarlanmıştır. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörü**, sürecin hızlı bir şekilde görsel olarak değerlendirilmesini ve olası hata kaynaklarını belirleyemeyi sağlar.

Kullanım Talimatı

1. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörünü** **AXIS AX-WIH01 Aparatına** yerleştiriniz. Aparat, yıkama dezenfeksiyonu işlemi için ulaşılması zor alanları taklit etmek için tasarlanmıştır.
2. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörünü**, **AXIS AX-WIH01 Aparatını** ve diğer malzemelerle birlikte yıkayıcıya yerleştiriniz. Aparat, tepsiye yerleştirmeyi kolaylaştıran kancalara sahiptir.
3. Yıkayıcıyı her zamanki gibi çalıştırınız.
4. Temizleme döngüsü bittiğinde, aparatı ve indikatörü tepside çıkarınız. Yıkama etkinliği deterjan, su sıcaklığı, süre ve yıkama penetrasyonundan etkilendir. Bu değişkenlerin uygun bir kombinasyonu ile iyi bir temizlik sonucu elde edilebilir.
5. Verilen renk dönüşüm tablosuna göre sonuçları gözlemleyin ve kaydedin. Olumsuz sonuçlar ortaya çıkarsa, kullanıcılar deterjanın kalitesini / miktarını, temizleme süresini, sıcaklığı ve yıkayıcının genel durumunu kontrol etmelidir.
6. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörü**, kullanıcıların indikatör üzerine notlar almalarını sağlayan yazılabilir bir yapıya sahiptir ve bu etiketler kayıt/ dokümantasyon amaçlı kullanılabilir.

Depolama

10-30 ° C ile % 30-80 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayınız. Dondurmayın ve doğrudan güneş ışığı koymayınız. (bu rengini bozabilir)

Önemli

Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörü tek kullanımlıktır. İndikatör mürekkebine elinizle dokunmayın. **AXIS AX-WIH01 Aparat** 100 çevrime kadar tekrar kullanılabilir.

Yok etme

Kullandıktan sonra, ülkenizin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine göre yok ediniz.

○ İşlem görmüş ve başarılı



Hatalı Sonuç

ENG

TR