

Hydrogen Peroxide Tape Hidrojen Peroksit Bandı

@x
AXIS

**PRODUCT CODE/ÜRÜN KODU
AXH19**



compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıglı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Hydrogen Peroxide Tape ¾" (19 mm x 50 m) AXH19

for monitoring Hydrogen Peroxide sterilization process

Product description

Axis Hydrogen Peroxide Tape with self-adhesive paper tape printed with indicator ink have been designed to monitor Hydrogen Peroxide sterilization processes, ensuring adequate exposure to the sterilizing agent during the sterilization process and allowing to distinguish between processed and unprocessed items.

Directions for use


1. Place a wrapped package closed with Axis Hydrogen Peroxide Tape that will be sterilized by Hydrogen Peroxide inside a sterilizer.
2. An Axis Hydrogen Peroxide Tape has the size of 19 mm x 50 m
3. Run the sterilizer as usual
4. After the sterilization process has finished, remove the package and analyze the indicator results. The indicator must turn to the reference color for when it was exposed to Hydrogen Peroxide.
5. If a non-uniform or no color change is noticed, it should be reported immediately to the supervisor.

Storage

Store it in a dark place between 15-30°C, 35-60% relative humidity. Do not put direct sunlight. Do not re-use. Do not store close to sterilizing agents. Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in recommended conditions.

Disposal

Discard after use, according to your country's healthcare and safety regulations.

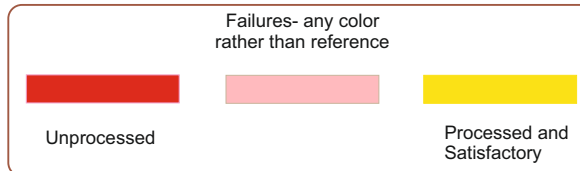

Results Reference Guide

Hidrojen Peroksit Bandı ¾" (19 mm x 50 mm) AXH19

Hidrojen Peroksit sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi içindir

Ürün Açıklaması

İndikatör mürekkebi ile basılmış kendinden yapışkanlı kağıt Axis Hidrojen Peroksit Bantları, Hidrojen Peroksit sterilizasyon işlemlerini izlemek, sterilizasyon işlemi sırasında sterilizasyon ajanına yeterli düzeyde maruziyeti ve işlenmiş/işlenmemiş malzemeleri ayırt etmek için tasarlanmıştır.

Kullanım Talimatı


1. Hidrojen Peroksit ile sterilize edilecek malzemeleri Axis Hidrojen Peroksit Bandı ile kapatıp sterilizatör içine yerleştiriniz.
2. Axis Hidrojen Peroksitli Bandı boyutları 19 mm x 50 mm'dir
3. Sterilizatörü her zamanki gibi çalıştırınız.
4. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra paketi çıkarınız ve indikatör sonuçlarını analiz ediniz. İndikatör Hidrojen Peroksit maruz kaldığında referans renge dönmelidir.
5. Eşit olmayan bir renk değişikliği fark edilirse, derhal yetkili kişiye bildiriniz.

Depolama

15-30°C, %35-60 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı ile temas ettirmeyiniz. Tekrar kullanmayınız. Sterilize edici maddelerin yakınında saklamayınız. İndikatörlerin, önerilen koşullarda saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık son kullanma tarihi vardır.

Yok etme

Kullandıktan sonra ülkenizin sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine göre atınız

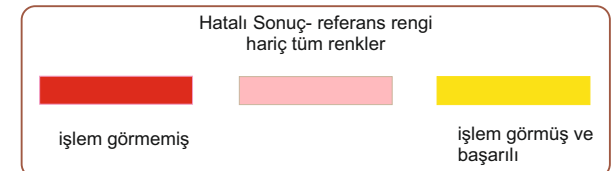

Sonuç Referans Rehberi