


Wash Indicator Yıkama İndikatörü

@x **AXIS**®

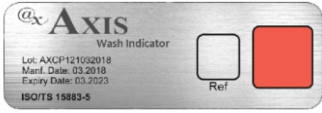

Holder: AX-WIH02

Product Code/ Ürün Kodu: AXCP123

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici
Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Wash Indicator

for monitoring efficiency of washing device

Product description

AXIS Washing indicators consist of temperature stable support containing a mixture of specially combined natural colored components (proteins, carbohydrates, fatty acids, and dyes). In all cases, indicator colored test soil is non-toxic, dissolves with most of the cleaning agent and is swept along with the washing fluid. AXIS Washing Indicator cleaning indicators formula allows detection of all the factors that affect the outcome of the washing process. AXIS Washing indicators can be used for routine control of cleaning processes and allow monitoring of washing effectiveness in automatic machines including ultrasonic washing machines with different washing configurations.

Instructions for use

- 1.Choose the AXIS indicator according to the desired procedure
- 2.Place the indicator on AXIS AX-WIH02 holder
- 3.Place the system on the tray along with the material. The holder system can also be used within an empty washer (without material).
- 4.Once the cleaning cycle is over, remove the indicator.
- 5.Analyze AXIS Washer indicators using and record results. If unfavorable results are obtained, perform the appropriate corrective actions and repeat the washing process.

Use at least one AXIS Washing indicator for each cleaning cycle.

Precautions

Do not reuse AXIS Washing indicators. Do not touch the indicator ink with your hands.

Storage

AXIS Washing indicators should be stored at temperatures between 10-30 °C, protected from light, RH 30-80 %, within its original packaging.
NOTE: in case of remaining traces of indicator colored spot after the washing process, do not store the used indicator under direct light since this may deteriorate its coloring.



Unprocessed



Failure-any color rather than reference



Processed and successful

Yıkama İndikatörü

yıkama cihazlarının etkinliğini gözlemlemek için

Ürün Açıklaması

AXIS Yıkama indikatörleri özel olarak birleştirilmiş doğal renkli bileşenlerin (proteinler, karbohidratlar, yağ asitleri ve boyalar) bir karışımını içeren sıcaklığa dayanıklı destekten oluşur. Her durumda, indikatör renkli test kiri toksik değildir, temizlik maddesiyle birlikte çözünür ve yıkama sıvısıyla birlikte temizlenir. AXIS Yıkama indikatörü temizleme indikatörü formülü, yıkama işleminin sonucunu etkileyen tüm faktörlerin tespit edilmesini sağlar. AXIS Yıkama indikatörleri, temizleme işlemlerinin rutin kontrolü için kullanılabilir ve farklı yıkama konfigürasyonlarına sahip ultrasonik yıkama makineleri dahil olmak üzere otomatik makinelerde yıkama etkinliğinin izlenmesine olanak tanır.

Kullanım için talimatı

1. İstenen prosedüre göre AXIS indikatörü seçin
2. Göstergiyi AXIS AX-WIH02 holdera yerleştirin
3. Sistemi malzemeye birlikte tepsiye yerleştirin. Tutucu sistem boş bir yıkayıcı içinde de kullanılabilir (malzeme olmadan).
4. Temizleme döngüsü bittiğinde çıkarın.
- 5.AXIS Yıkama indikatörlerini kullanarak analiz edin ve sonuçları kaydedin. Olumsuz sonuçlar alınırsa, uygun düzeltici işlemleri yapın ve yıkama işlemini tekrarlayın.

Her temizleme döngüsü için en az bir AXIS Yıkama indikatörü kullanın.

Önlemler

AXIS Yıkama indikatörünü tekrar kullanmayın. İndikatör mürekkebine ellerinizle dokunmayın.

Depolama

AXIS Yıkama indikatörleri 10-30 °C sıcaklıkta, ışıktan korunarak, bağıl nem %30-80, orijinal ambalajında saklanmalıdır.
NOT: yıkamadan sonra indikatör renkli noktanın izlerinin kalması durumunda kullanılmış indikatörü doğrudan ışık altında saklamayın, çünkü bu indikatörün rengini bozmaktadır.



İşlem öncesi



Hata-referans harici tüm renkler



İşlem görmüş ve başarılı