


Ultrasonic Washer Indicator

Ultrasonik Yıkama İndiktörü

@x **AXIS**®

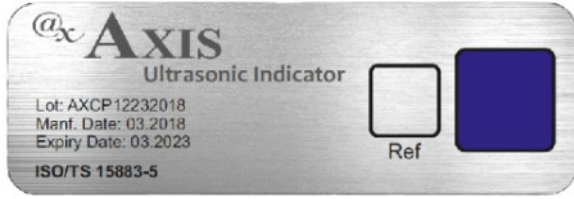

Product Code/Ürün Kodu: AXCP123

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici
Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Ultrasonic Washer Indicator

for monitoring efficiency of ultrasonic washer device

Product description

AXIS Ultrasonic Washing indicator consist of temperature stable support containing a mixture of specially combined natural colored components (proteins, carbohydrates, fatty acids, and dyes). In all cases, indicator colored test soil is non-toxic, dissolves with most of the cleaning agent and is swept along with the washing fluid. AXIS Washing Indicator cleaning indicators formula allows detection of all the factors that affect the outcome of the washing process. AXIS Washing indicators can be used for routine control of cleaning processes and allow monitoring of washing effectiveness in automatic machines including ultrasonic washing machines with different washing configurations.

Instructions for use

- 2.Place the indicator on AXIS AX-WIH01 or AX-WIH02 holder
 - 3.Place the system with the material. The holder system can also be used within an empty washer (without material).
 - 4.Once the cleaning cycle is over, remove the indicator.
 - 5.Analyze AXIS Ultrasonic Washer indicators using and record results. If unfavorable results are obtained, perform the appropriate corrective actions and repeat the washing process. The indicator ink must be completely cleared for successful result.
- Use at least one AXIS Ultrasonic Washing indicator for each cleaning cycle.

Precautions

Do not reuse AXIS Ultrasonic Washing indicators. Do not touch the indicator ink with your hands.

Storage


AXIS Washing indicators should be stored at temperatures between 10-30 °C, protected from light, RH 30-80 %, within its original packaging.
NOTE: in case of remaining traces of indicator colored spot after the washing process, do not store the used indicator under direct light since this may deteriorate its coloring.



Unprocessed



Failure-any color rather than reference

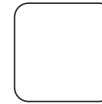


Processed and successful



İşlem öncesi



Hata- referans renk harici tüm renkler

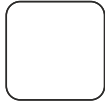

İşlem görmüş ve başarılı

Ultrasonik Yıkama İndikatörü

ultrasonik yıkama cihazlarının etkinliğini gözlemlemek için

Ürün Açıklaması

AXIS Ultrasonik Yıkama indikatörü, özel olarak birleştirilmiş doğal renkli bileşenlerin (proteinler, karbonhidratlar, yağ asitleri ve boyalar) bir karışımını içeren sıcaklığa dayanıklı destekten oluşur. Her durumda, indikatör renkli test kiri toksik değildir, temizlik maddesinin çoğuyla çözünür ve yıkama sıvısıyla birlikte temizlenir. AXIS Yıkama İndikatörü temizleme indikatör formülü, yıkama işleminin sonucunu etkileyen tüm faktörlerin tespit edilmesini sağlar. AXIS Ultrasonik Yıkama İndikatörü, temizleme işlemlerinin rutin kontrolü için kullanılabilir ve farklı yıkama konfigürasyonlarına sahip ultrasonik yıkama makineleri dahil olmak üzere otomatik makinelerde yıkama etkinliğinin izlenmesine olanak tanır.

Kullanım talimatı

- 2.İndikatörü AX-WIH01 veya AX-WIH02 aparatına yerleştirin
 3. Sistemi malzeme ile birlikte yerleştirin. Holderi sistem boş bir yıkayıcı içinde de kullanılabilir (malzemesiz).
 4. Temizleme döngüsü bittiğinde indikatörü çıkarın.
 5. AXIS Ultrasonik Yıkayıcı indikatörlerini kullanarak analiz edin ve sonuçları kaydedin. Olumsuz sonuçlar alınır, uygun düzeltici işlemleri yapın ve yıkama işlemini tekrarlayın. Başarılı sonuç için indikatör mürekkebi tamamen temizlenmelidir.
- Her temizleme döngüsü için en az bir AXIS Ultrasonik Yıkama indikatörü kullanın.

Önlemler

AXIS Ultrasonik Yıkama indikatörlerini tekrar kullanmayın. Gösterge mürekkebine ellerinizle dokunmayın.

Depolama

AXIS Ultrasonik Yıkama indikatörleri 10-30 °C sıcaklıkta, ışıktan korunarak, bağıl nem %30-80, orijinal ambalajında saklanmalıdır.
NOT: yıkamadan sonra indikatör renkli noktanın izlerinin kalması durumunda kullanılmış indikatörü doğrudan ışık altında saklamayınız, çünkü indikatörün rengini bozmaktadır.

ENG

TR