

WASHING ACTIVITY INDICATOR YIKAMA ETKİNLİK İNDİKATÖRÜ

Product Code / Ürün Kodu: AXCP125

@x **AXIS**®



compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Washing Activity Indicator

for verification of the cleaning efficacy of washer-disinfectors

Product Description

Axis Cleaning Efficiency Indicator enables you to verify the cleaning efficacy of washer-disinfectors during routine operation check. The routine use of this test will help ensure that your washer is performing at a consistent level, enhancing the routine visual inspection of instruments.

If unfavorable results do occur, the users must check the quantity of detergent, cleaning time, temperature as well as general condition of the washer.

Ready-to-use (single use product)
The test provides efficient and reliable results
Transparent cover to enable visual check

Instructions of use

1. place the envelope with the washing indicator inside the equipment, together with the load to be processed. WARNING! The indicator must be completely submerged in the washing solution to work properly.
2. Process the load according to the established procedures.
3. After completing the process, analyze the results. The indicator must change to the reference color for considering that the desired disinfection conditions were met. The color in the indicator must be homogenously cleaned and removed in the indicator surface

Storage and shelf life


- Keep this indicator in dry places, protected from light and at temperatures between 10-30 °C and 30-80 % relative humidity. Do not wet. Do not storage close to sterilizing or disinfection agents.
- Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in the recommended conditions. Both expiration date and batch of the product are specified on the box label and on each unit of product. Do not use indicators after their expiration date.
- After use, the indicator will not change in 1 year, if stored at the temperature and relative humidity previously indicated.



Unprocessed



Failure- all colors except
reference

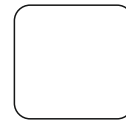

Processed and
successful

Yıkama Etkinlik İndikatörü

yıkayıcı dezenfektörlerin temizleme etkinliğinin doğrulanması için

Ürün Açıklaması

Axis Yıkama Etkinlik İndikatörü, rutin çalışma kontrolü sırasında yıkayıcı dezenfektörlerin temizleme etkinliğini doğrulamanıza olanak tanır. Bu testin rutin kullanımı, yıkayıcınızın tutarlı bir seviyede performans göstermesini sağlamaya yardımcı olacak ve aletlerin rutin görsel incelemesini geliştirecektir.

Olumsuz sonuçlar ortaya çıkarsa, kullanıcılar deterjan miktarını, temizleme süresini, sıcaklığı ve ayrıca yıkama makinesinin genel durumunu kontrol etmelidir.

Kullanıma hazır (tek kullanımlık ürün)
Test verimli ve güvenilir sonuçlar sağlar
Görsel kontrolü sağlamak için şeffaf kapak

Kullanım Talimatı

1. Yıkama etkinlik indikatörünü işlenecek yükle birlikte ekipmanın içine yerleştirin. UYARI! İndikatörün düzgün çalışması için yıkama solüsyonuna tamamen daldırılmış olması gerekir.
2. Yüğü belirlenmiş prosedürlere göre işleyin.
3. İşlemi tamamladıktan sonra sonuçları analiz edin. İstenen dezenfeksiyon koşullarının karşılandığının dikkate alınması için indikatörün referans renge dönüşmesi gerekir. İndikatördeki renk homojen bir şekilde temizlenmeli ve indikatör yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

- İndikatörü kuru, ışıktan korunan ve 10-30 °C sıcaklıkta ve %30-80 bağıl nemde saklayın. Islatmayın. Sterilizasyon veya dezenfeksiyon maddelerinin yakınında saklamayın.
- İndikatörler önerilen koşullarda saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık bir son kullanma tarihine sahiptir. Ürünün hem son kullanma tarihi hem de partisi kutu etiketinde ve ürünün her biriminde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçen indikatörleri kullanmayın.
- Kullanımdan sonra indikatör, daha önce belirtilen sıcaklık ve bağıl nemde saklanırsa 1 yıl içinde değişmez.



İşlem öncesi



Hata- referans harici tüm
renkler



İşlem görmüş
ve başarılı

ENG

TR