

Container Seal with Chemical Indicator Kimyasal İndikatörlü Konteyner Kilidi

@x **AXIS**®

Product Code/ Ürün Kodu:
AXCP220



250 pcs/adet

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici
Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Container Seal

for monitoring Steam sterilization processes

Product description

Axis AXCP220 Container Seal with Chemical Indicators are designed to react to Steam sterilization processes. Pink indicator turns to reference color of Black when the load exposed to Steam sterilant. The plastic security lock is locked using disposable plastic security locks, these locks can only be opened by breaking. The container is locked before the sterilization process and acts as a security to prevent unauthorized persons from opening it after the sterilization process. It is the method that can be used to mark and identify the containers, trays, devices to be sterilized.

Directions for use


1. Place the Axis AXCP220 Container Seal on each container that will be sterilized by Steam.
2. Plastic safety lock is disposable, used by locking containers to secure the lid cover after sterilization until surgery, which can only be opened by breaking.
3. Run the sterilizer as usual with the container inside.
4. The container is locked before the sterilization process and acts as security to prevent unauthorized persons from opening it after the sterilization process.
5. For to check exposed and unexposed containers identification compare the results from the given reference color chart. If the color change to reference color of black means that the container has been exposed to Steam.
6. After use, the seal can only be opened by breaking.

Storage

Store it in a dark place between 15-30°C, 35-60% relative humidity.
Do not put direct sunlight.
Do not re-use.
Do not store close to sterilizing agents.
Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored in recommended conditions.

Disposal

Discard after use, according to your country's healthcare and safety regulations.

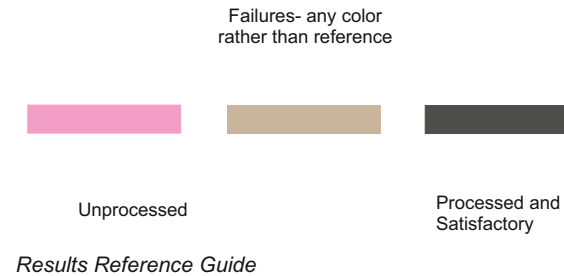

Results Reference Guide

ENG

Konteyner Kilidi

Buhar sterilizasyon işlemlerini izlemek için

Ürün Açıklaması

Axis AXCP220 Kimyasal İndikatörlü Konteyner Kilidi, Buhar sterilizasyon süreçlerine tepki verecek şekilde tasarlanmıştır. Yük Buhar sterilantına maruz kaldığında pembe indikatör siyah referans rengine döner. Plastik güvenlik kilidi tek kullanımlık plastik güvenlik kilitleri kullanılarak kilitlenir, bu kilitler sadece kırılarak açılabilir. Sterilizasyon işleminden önce konteyner kilitlenir ve sterilizasyon işlemi sonrasında yetkisiz kişilerin açmasını engellemek amacı ile güvenlik görevi görür. Sterilizasyon yapılacak konteynerleri, tepsiyi, cihazları işaretlemek ve tanımlamak için kullanılabilecek metottur.

Kullanım Talimatı


1. Axis AXCP220 Kimyasal İndikatörlü Konteyner Kilidi Buhar ile sterilize edilecek her bir konteyner üzerine yerleştirin.
2. Plastik güvenlik kilidi tek kullanımlıktır, sterilizasyondan sonra kilit sadece kırılarak açılabilir. Ameliyata kadar güvenlik amaçlı kilitli saklanabilir.
3. Sterilizatörü her zamanki gibi konteyner içindeyken çalıştırın.
4. Konteyner sterilizasyon işleminden önce kilitlenir ve sterilizasyon işleminden sonra yetkisiz kişilerin açmasını önlemek için güvenlik görevi görür.
5. İşlem görmüş ve görmemiş konteynerleri ayırt etmek için, verilen referans renk tablosundaki sonuçları karşılaştırın. Rengin siyah referans rengine dönüşmesi, konteynerin Buhara maruz kaldığı anlamına gelir.
6. Kullanımdan sonra kilit ancak kırılarak açılabilir.

Depolama

15-30°C, %35-60 bağıl nem arasında karanlık bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığı koymayın. Yeniden kullanmayın. Sterilize edici maddelerin yakınına saklamayın. İndikatörlerin, önerilen koşullarda saklandığında üretim tarihinden itibaren 5 yıllık bir son kullanma tarihi vardır.

Yok etme

Kullandıktan sonra ülkenizin sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine göre atın.

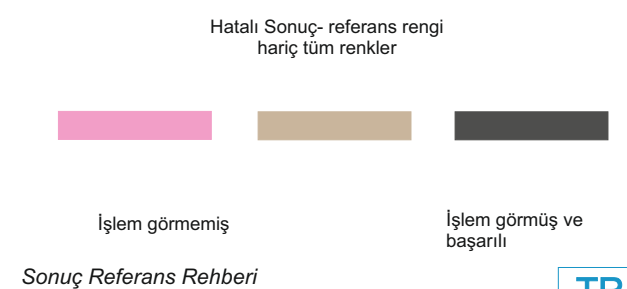

Sonuç Referans Rehberi

TR