



MULTI PARAMETER INDICATOR ÇOK PARAMETRELİ İNDİKATÖR

PRODUCT CODE/ÜRÜN KODU:
AXSDC3
Type 4

RESULT REFERENCE GUIDE

UNPROCESSED/ İŞLEM GÖRMEMİŞ



FAILURE/ HATALI



PROCESSED AND SATISFACTORY
İŞLEM GÖRMÜŞ VE BAŞARILI



MULTIPARAMETER INDICATOR

for steam sterilization processes

Product Description

AXIS Multiparameter Process Indicators are single-use chemical indicators that consist of one-side laminated punched paper double strips printed with indicator ink. These indicators have been designed to monitor Steam sterilization processes within loads, ensuring an adequate exposure to the sterilizing agent during the sterilization process and allowing to distinguish between processed and unprocessed items. Innovative highly sensitive pink ink was developed to turn to dark brown/black when the indicator is exposed to Steam considering the critical process variables which provides additional quality assurance.

Instructions for Use

1. Place a AXIS Multiparameter Process Indicator within each package, bag or tray that will be sterilized by Steam. In rigid containers, place the indicator in every corner, or at least two diagonally opposite corners, to ensure that the sterilization agent has reached the most inaccessible areas.
2. Perform the sterilization cycle.
3. After the sterilization process has finished, remove the indicators from the sterilizer and analyze the results. For all the chemical indicators exposed to Steam, the ink must turn to the dark brown/black reference color when the sterilization parameters are reached. For reference color, please refer to Result Reference

Storage

Indicators should be stored in a dry place, protected from light at temperatures between 10-30 °C, 30-80 % relative humidity. Do not wet. Do not store near sterilizing agents.

Shelf Life

Chemical Indicators have an expiration date of 5 years from the date of manufacture when stored at recommended storage conditions. Both the expiration date and batch number of the product are specified on the package label and in each unit of the product. Do not use indicators after their expiration date.

Precautions

Do not expose AXIS Multiparameter Process Indicators to Ethylene Oxide, Dry Heat or any sterilization process other than Steam. Do not reuse.

Disposal

Discard chemical indicators after use along with paper waste, according to your country's healthcare and safety regulations.

ÇOK PARAMETRELİ İNDİKATÖR

buhar sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi için

Ürün Açıklaması

AXIS Çok Parametrelili Proses İndikatörleri, indikatör mürekkebi ile basılmış, tek tarafı lamine delikli kağıt çift şeritlerden oluşan tek kullanımlık kimyasal indikatörlerdir. Bu indikatörler, sterilizasyon işlemi sırasında sterilizasyon maddesine yeterli maruz kalmanın sağlanması ve işlenmiş ve işlenmemiş öğeler arasında ayırım yapılmasına izin vererek, yükler içindeki Buhar sterilizasyon işlemlerini izlemek için tasarlanmıştır. Ek kalite güvencesi sağlayan kritik işlem değişkenleri göz önünde bulundurularak indikatör buhara maruz kaldığında koyu kahverengi/siyah dönüşecek şekilde son derece hassas pembe mürekkep ile geliştirilmiştir.

Kullanım için talimatlar

1. Buhar ile sterilize edilecek her paket, çanta veya tepsiye bir AXIS Çok Parametrelili İşlem indikatörünü yerleştirin. Sert kaplarda, sterilizasyon maddesinin en erişilemeyen alanlara ulaştığından emin olmak için indikatörü her köşeye veya çapraz olarak zıt en az iki köşeye yerleştirin.
2. Sterilizasyon döngüsünü gerçekleştirin.
3. Sterilizasyon işlemi bittikten sonra indikatörleri sterilizatörden çıkarın ve sonuçları analiz edin. Buhara maruz kalan tüm kimyasal indikatörler için, sterilizasyon parametrelerine ulaşıldığında mürekkebin koyu kahverengi/siyah referans rengine dönmesi gerekir. Referans renk için lütfen Sonuç Referans Kılavuzuna bakınız.

Depolama

İndikatörler kuru, ışıktan korunan, 10-30 °C sıcaklıkta, %30-80 bağıl nemde saklanmalıdır. Islatmayın. Sterilizasyon maddelerinin yakınında saklamayınız.

Raf ömrü

Tavsiye edilen depolama koşullarında saklandığında Kimyasal İndikatörlerin son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır. Hem son kullanma tarihi hem de parti ürün numarası, ambalaj etiketinde ve her bir ünite de belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçen indikatörleri kullanmayınız.

Önlemler

AXIS Çok Parametrelili İşlem Göstergelerini Etilen Oksit, Kuru Isı veya Buhar dışında herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakmayınız. Tekrar kullanmayınız.

İmha etme

Kullandıktan sonra kimyasal indikatörleri, kullanım amacınıza göre kağıt atıklarıyla birlikte ülkenin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine göre atın.








Manufacturer: Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.

10006/1 No:43 AOSB Cıglı IZMIR TURKEY

Tel:+90 232 348 60 60

Fax: +90 232 348 60 90

www.kordontip.com - info@kordontip.com

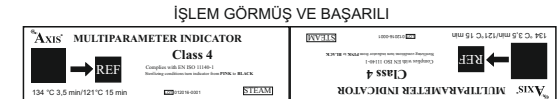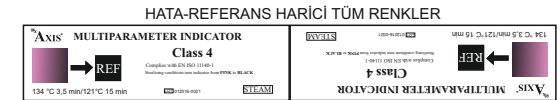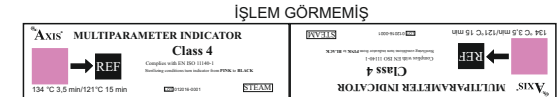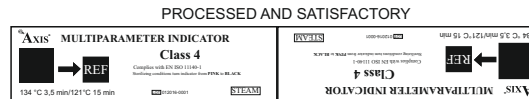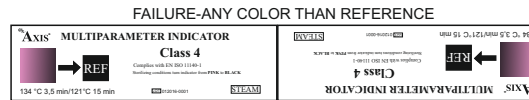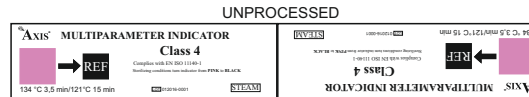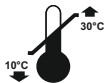

ENG

TR