


Container Indicator Label Konteyner İndikatör Etiketi

@x **AXIS**®

Product Code/ Ürün Kodu: AXCP210

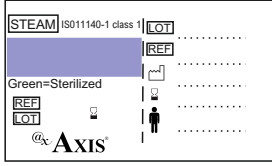

250 pcs

compatible with ISO 11140-1:2017
ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici
Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cıgılı İZMİR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

Container Indicator Label

Container seals for steam sterilization processes

Product Description

Container seals for Steam sterilization processes.
Conditions: 10 minutes 121 °C ; 2 minutes 134 °C.
Initial color: blue
Final color: dark green


Container Seals are composed of a self-adhesive label with an chemical indicator and a pin. The label area provides the space for production and expiry date, batch number, initials of the person responsible releasing the load and the container content. The seal contains a steam Class 1 process indicator according to EN ISO 11140-1 standard.

Application

The product is used to seal instrument containers to prevent accidental use of the contents if the container has been tampered with or opened by mistake or has not been sterilized.

Storage

Indicators should be stored in dry places, protect from light at temperatures between 15 - 30 °C, 30 - 80 % relative humidity.
Do not wet.
Do not storage close to sterilizing agents.
Do not use indicators after their expiration date.
Do not reuse.

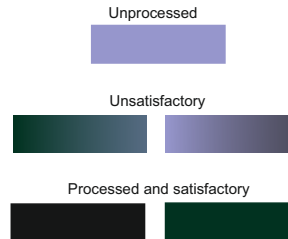

Konteyner İndikator Etiketi

Buhar sterilizasyon işlemleri için konteyner etiketi

Ürün Açıklaması

Buharlı sterilizasyon işlemleri için konteyner etiketi.
Koşullar: 10 dakika 121 °C ; 2 dakika 134 °C.
İlk renk: mavi
Son renk: koyu yeşil


Konteyner Etiketleri, kimyasal indikatörlü ve iğneli kendinden yapışkanlı bir etiketten oluşur. Etiket alanı, üretim ve son kullanma tarihi, parti numarası, yükü serbest bırakan kişinin baş harfleri ve konteyner içeriği için alan sağlar. Conta, EN ISO 11140-1 standardına göre bir buhar Sınıfı 1 işlem indikatörü içerir.

Kullanım

Ürün, kap kurcalanmışsa, yanlışlıkla açılmışsa veya sterilize edilmemişse içeriğin yanlışlıkla kullanılmasını önlemek için konteynerleri etiketlemek ve mühürlemek amacıyla kullanılır.

Depolama

İndikatörler kuru, ışıktan korunan, 15 - 30 °C sıcaklıkta, %30 - 80 bağıl nemde saklanmalıdır.
ıslatmayın.
Sterilize edici maddelere yakın saklamayın.
Son kullanma tarihi geçen göstei kullanmayın.
tekrar kullanmayın.

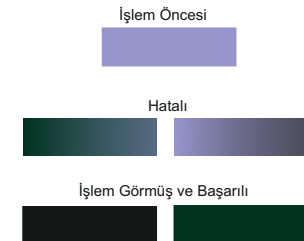

ENG

TR